

Iontophorèse - Thérapie de l'hyperhidrose

medisun GS-10 - Une version de base éprouvée

medisun GS-10 emploie une technique à base de **courant continu** connue depuis des années associée à de l'eau du robinet.

Caractéristiques de medisun GS-10 et PS-20

Module de sécurité avec limitation de courant, protection contre les coups électriques, le surdosage et surveillance de l'immersion

Utilisable sans aide extérieure

Programmation de dose sans paliers et déroulement automatique de la séance sans interrupteur extérieur, grâce à la commande par un microprocesseur intelligent avec mémoire et timer.

Programmation de dose également possible durant la séance

Alimentation de sécurité 12V

Nettoyage simple et rapide du panneau de commande tactile.

Grand écran indiquant le temps restant.



medisun PS-20 - Une version à courant pulsé

Caractéristiques techniques particulières de medisun PS-20


L'utilisation de courant pulsé à une fréquence physiologiquement favorable fait disparaître presque totalement la sensation de courant électrique habituelle durant le traitement.

PS-20 peut mémoriser trois programmations thérapeutiques différentes (par ex. pour les mains, les pieds et les aisselles). En plus du temps de traitement et de la dose, le type de courant et le mode d'application sont aussi mémorisés. Le déroulement de la séance devient, de part son automatisation, d'une facilité enfantine.

Une fonction spéciale zones sensibles permet de réduire le courant délivré de 50%, facilitant ainsi le traitement individualisé de patients particulièrement sensibles, comme les enfants, ou de zones sensibles, telles que le visage ou les aisselles.

Accessoires medisun

Électrodes axillaires

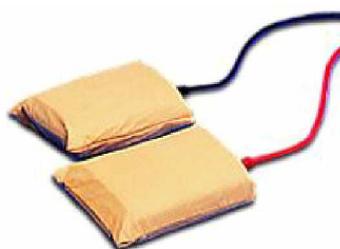

Pour le visage



Bacs confort



medisun® Iontophorese - Hyperhidrosetherapie

Hyperhidrosis - Wenn Schwitzen zum Problem wird

Vorstellungsgespräch, Kundentermin oder einfach ein festlicher Empfang - Anlässe, bei denen man dem Gegenüber der Höflichkeit folgend die Hand reichen möchte. Doch Sie sind nervös! Sie möchten diese Geste vermeiden, da Ihre Hände schweißnass sind. Etwa 1% der Bevölkerung leiden unter übermäßigem Schwitzen an Händen, Füßen oder Achseln.



Hyperhidrosis - Eine therapierbare Krankheit

Diese Krankheit bezeichnet man als „Hyperhidrosis“ und sie wird von vielen Betroffenen fälschlicherweise als nicht therapierbar angesehen. Durch seine kalten, schweißnassen Hände leidet der Betroffene im täglichen Leben unter starken psychischen und arbeitsmedizinischen Belastungen.

Die medisun - Hyperhidrosistherapie

Die medisun-Therapie gegen Hyperhidrosis ist ein seit vielen Jahren wissenschaftlich anerkanntes Behandlungsverfahren, das in 98% der Fälle ohne Medikamente oder operative Eingriffe zu normal trockener Haut führt. Die medisun-Therapie ist absolut ungefährlich, und bei korrekter Durchführung schmerz- und nebenwirkungsfrei*.



Die medisun - Behandlungskonzept

Die Behandlung erfolgt durch Hand- und Fußbäder bzw. zur Therapie der Achseln, des Gesichts oder des Nackens/Rückens mittels spezieller Schwamm-Applikatoren, die von schwachen Gleich- oder Pulsstrom durchflossen werden. Die Stromstärke kann individuell angepasst werden und ist auf Maximalwerte limitiert.

Das medisun - Behandlungsverfahren

Das Behandlungsverfahren unterteilt sich in zwei Phasen: In der ersten Phase (Initialtherapie) wird unter ärztlicher Kontrolle therapiert und die Durchführung der Behandlung erlernt. Nach etwa 10 Behandlungen normalisiert sich die Schweißsekretion. Die ärztliche Kontrolle liefert den von der Krankenkasse häufig verlangten Nachweis des Initialerfolges. Bedingt durch den reversiblen Charakter der medisun-Therapie ist eine Langzeitbehandlung indiziert, die mit dem eigenen Gerät alleine zu Hause durchgeführt wird. Zum Erhalt des Therapieerfolges wird je nach Stärke des Krankheitsbildes ein bis drei mal pro Woche für 10-15 Minuten therapiert.

Die Behandlungskosten

Die medisun-Therapie ist verordnungsfähig! Die Kosten für ein Hyperhidrosis Heimtherapiegerät werden in der Regel nach einem begründeten Antrag auf Kostenerstattung von der Krankenkasse übernommen. Für die ärztliche Verordnung sollte der „Antrag auf Kostenübernahme für ein Iontophorese-Therapiegerät“ verwendet werden. Diesen können Sie bei uns anfordern oder von unserer Webseite herunterladen. Und von Ihrem Arzt ausfüllen lassen. Senden Sie uns dann den unterschriebenen Antrag zu. Wir kümmern uns um alle weiteren Schritte! In der Regel rechnen wir direkt mit Ihrer Krankenkasse ab und liefern Ihnen Ihr medisun-Therapie-Heimgerät nach Hause.

Das medisun - Therapiegeräte

Die medisun-Therapie-Heimgeräte zeichnen sich durch ihre einfache Bedienung und maximale Zuverlässigkeit bei Wirksamkeit aus. In enger Zusammenarbeit mit Universitätskliniken entstand dieses Gerätekonzept. Das Basisgerät 10 ermöglicht die Therapie mit dem Gleichstromverfahren.

Das Komfortgerät medisun PS-20 bietet neben dem vorteilhaften Pulsstromverfahren weitere Vorteile für eine flexible, komfortable Therapie. Einzelheiten hierzu entnehmen Sie bitte den entsprechenden Geräteinformationen.



Das medisun - Sicherheitskonzept

Medisun-Therapiegeräte sind zugelassene Medizinprodukte und TÜV-geprüft. Bedingt durch die modernste mikroprozessor-gestützte Regelung sind die Dosiswerte gleich bleibend und reproduzierbar. Mit ausgeklügelten Sicherheitskonzepten wie der Schutzfunktion gegen elektrische Schläge* und der intelligenten Eintauchüberwachung mit Übertherapieschutzfunktion erhalten Sie mit den medisun-Therapiegeräten Anwendungsfreundlichkeit auf höchstem Niveau.

Kontraindikationen

Fragen Sie bitte Ihren Hautarzt nach der medisun-Therapie. Kontraindikationen: Patienten mit Herzschrittmachern, Metallimplantaten und großen Hautdefekten sollten, ebenso wie Frauen während der Schwangerschaft, auf eine Therapie verzichten. Bitte informieren Sie sich in diesen Fällen unbedingt bei Ihrem zuständigen Arzt

