

# CLATUU™

## Cryolipolyse



**CLATUU™** de CLASSYS, est un appareil de Cryolipolyse avec 2 pièces à main, innovant, qui permet de réduire rapidement les masses graisseuses disgracieuses localisées.

**Sans douleur, ni éviction sociale.**



- Non invasif.
- Le refroidissement puissant (jusqu'à  $-9^{\circ}\text{C}$ ) provoque l'apoptose des adipocytes et l'élimination de la graisse.
- Jeux de 2 pièces à main (courbes ou plates) pour traiter simultanément 2 zones.
- Avec fonction massage.
- Ecran de contrôle intuitif sur les pièces à main.
- Unique : refroidissement sur toute la surface des pièces à main ( $360^{\circ}$ ).
- Pas de consommables !



CE  
0470




**FRITSCH Medical**  
La Dermatologie est notre spécialité

[www.fritsch-medical.fr](http://www.fritsch-medical.fr)

# CLATUU™

## Cryolipolyse

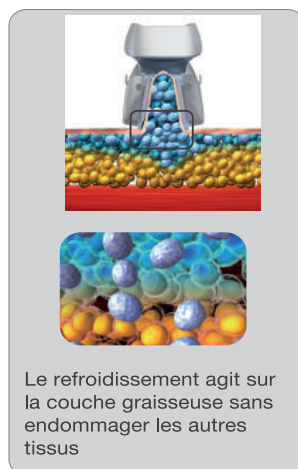

**La zone traitée sera engourdie lorsque les applicateurs seront retirés. Votre praticien effectuera alors un massage de la zone pendant 5-10 minutes immédiatement après la procédure.**



Mesure de la zone à traiter



Indication de la zone à traiter



Positionnement du gelPad sur la zone ciblée



Application des pièces à main



Durée du traitement : 40 à 60 minutes



Massage de la zone après le traitement

### DONNÉES TECHNIQUES :

**Type d'énergie :** Cooling therapy system

**Niveau massage :** 1~3

**Niveau refroidissement :** 1~4 (max -9°C)

**Niveau succion :** 1~4 (max 50 kPa)

**Durée :** 1~60 min

**Poids :** 92 KG

**Dimensions :** 490x715x1140 (H) mm

**Alimentation :** 230V - 50/60Hz -1250 W