

La référence en Cryo-Chirurgie

depuis 1966

BRYMILL propose une gamme complète d'unités de traitement, d'accessoires et de réservoirs de stockage.

Disponible en 2 versions

CRY-AC 5 : capacité 500 ml
Durée de conservation statique (20-24h)

CRY-AC 3 : capacité 300 ml
Durée de conservation statique (10-12h)

CRY-AC[®]-5

CRY-AC[®]-3



Livré avec 6 embouts



Grand choix de sondes
ouvertes ou fermées et
accessoires

CE medical
1639

FRITSCH Medical

La Dermatologie est notre spécialité

Brymill
CRYOGENIC SYSTEMS

www.brymill.com
(800) 777-2796
Ellington, CT 06029, USA

World Leader in
Cryosurgical Equipment

CRY-AC[®]

CAUTION: Federal law restricts this device to use by or on the order of a physician or veterinarian only.
FOR USE WITH LIQUID NITROGEN

EU Authorized Representative

Accessoires/ sondes ouvertes

Embouts coniques


Les embouts coniques A-B-C-D sont incluses avec chaque CRY-AC® et donne un jet plus concentré pour plus de précision. Le diamètre de l'ouverture dépendra de la taille et du type de lésion...



A=1mm C=0,55mm
B=0,75mm D=0,44mm

Spray courbe

Pour une vaporisation plus fine et atteindre les zones difficiles.

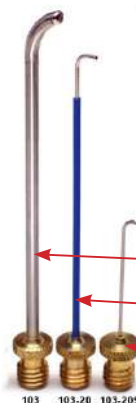

Original Bent Spray
7,6 cm x 16g
3,8 cm x 20g

Embout spray acné

Idéal pour l'acné et le cryopeel.




Adaptateur "luer lock"

Permet l'adaptation d'aiguilles jetables



Vaporisateur droit

Permet d'atteindre les condylomes dans les parties péri-anales, rectales ou vaginales.

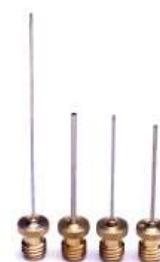

7,6 cm x 20g 2,5 cm x 18g
2,5 cm x 16g 2,5 cm x 20g

Cryo-chambres

Destruction tissulaire chirurgicale précise et en profondeur grâce au flot continu et focalisé d'azote liquide sur les lésions profondes.



Extentions de 90° ou de 45°



S'utilise essentiellement avec les chambres cryogéniques pour maintenir la chambre en position verticale tout en conservant l'appareil debout.

Extension malléable



S'adapte à tout type d'embout vaporisateur et de sonde de contact. Permet de changer la direction de la vaporisation tout en maintenant l'appareil en position verticale.

Cryo-cônes

Cônes de tailles variées (6, 11, 16, 25, 30, et 38mm) en néoprène servant à concentrer les particules vaporisées sur une surface limitée. Pour le traitement de verrues de taille importante et de tumeurs profondes.



Cryoplate

Disque transparent équipé de 4 ouvertures coniques de tailles variées (3, 5, 8, et 10mm) servant à concentrer les particules vaporisées sur une surface limitée.



TOUTES LES SONDES BRYMILL SONT AUTOCLAVABLES

Accessoires / sondes fermées

Mini-sondes

Pour le traitement du rebord des paupières, d'hyperplasie sébacée, d'angiomes, de lentigines, de petites verrues à faible teneur en kératine, de trichiasis et de lésions à proximité de l'œil ou dans le canal auditif externe. Permettent une très bonne visibilité et une maniabilité de précision.



1-2-3-4-5 & 6 mm

Sondes rondes

Pour lésions ulcérées, tumeurs volumineuses et structures osseuses concaves sous jacentes. Permet également un traitement cryogénique symétrique en forme de dôme dans les tissus mous.

6-8 mm
& 1-2 cm



Sondes plates

Pour le traitement des lésions plates.



1-2-2,5-3 cm
& 8 mm

Sondes coniques

Peuvent être introduites au sein d'une lésion de taille plus importante ou ulcérée, augmentant ainsi considérablement la surface traitée.



Sondes cervicales

Longueur et formes (dôme et plates) idéales traiter les lésions cervicales.

Sonde cervicale Dôme 19 et 25 mm

Sonde cervicale plate 19 et 25 mm - 25x5x5mm

Sonde cervicale 19x5x5mm



Sonde concave de 1cm

Idéale pour le traitement des larges lésions surélevées.



Sonde hémorroïdes

Idéale pour le traitement des hémorroïdes.

6 x 32 mm



TOUTES LES SONDÉS BRYMILL SONT AUTOCLAVABLES

Réservoir / Dewar

Pour stockage d'azote liquide

Pour stockage
d'azote liquide



Modèle	Litres	Durée de conservation statique
YDS-10L	10L	Durée de conservation statique 101 jours
YDS-20L	20L	Durée de conservation statique 202 jours
YDS-30L	30L	Durée de conservation statique 295 jours
YDS-50L	50L	Durée de conservation statique 352 jours

Tube de soutirage



Réf. 503



Réf. 502

Réf. 502
Système de soutirage
avec jauge pour Dewars
de 20 litres et plus.

Réf. 503
tube de soutirage pour
Dewars de 5 à 20 litres.

Roller Base



Sac de transport



Gants



www.fritsch-medical.fr

5 rue de la Fontaine 67490 Gottesheim - France

Appelez-nous au : (+33) 03 88 91 47 70

E-mail : contact@fritsch-medical.fr