



FRITSCH Medical
La Dermatologie est notre spécialité

Derungs 
MEDICAL LIGHTING

TRIANGO
LAMPE DE SOINS À LED



reddot design award
winner 2012



OPTIQUE HAUTES
PERFORMANCES
TECHNOLOGIE LED


TRIANGO. POUR VOS PATIENTS ET VOUS-MÊME.

La forme moderne de D^{med}® triango repose sur la devise « Keep it smart and simple » et séduit par son fonctionnalisme conséquent : un design élégant, combiné à la technologie LED la plus moderne et conçue pour les environnements de travail d'aujourd'hui. La puissance lumineuse, la couleur de lumière et le rendu de couleur sont idéalement adaptés au quotidien diversifié des cliniques et des cabinets médicaux.

- Excellent rendu des couleurs
La température de couleur de 4 500 K crée un champ d'éclairage contrasté et agréable sans dénaturation des couleurs (IRC > 95)
- Applications : cabinets médicaux et hôpitaux
· NF EN 60601
· NF EN 60601-2-41
- Faible consommation d'énergie
Longue durée de vie et économies d'énergie notables grâce à la technologie LED efficace, à des composants de haute qualité et à une construction robuste
- Champ éclairé homogène
Guidage optimal de la lumière sans reflets, sans ombres et sans éblouissement
- Pour gauchers et droitiers



reddot design award
winner 2012

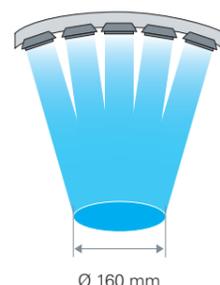

efficient *light*

Champ d'éclairage
1.0 m – Ø 16 cm



Très grande liberté de mouvement,
pour une disponibilité accrue



Gradation en continu grâce à un bouton
rotatif entre 10 et 100 %



Optique exclusive pour
des performances d'éclairage
élevées : 60 000 lx / 1 m



Hygiénique
Poignée amovible et stérilisable




EFFICACITÉ. ERGONOMIE. DESIGN.
TROIS CONCEPTS EN ACCORD PARFAIT.

La lampe garantit la plus grande amplitude de mouvement possible grâce au rayon d'action de ses bras et à son système de rotation sans fin. Le bras compensé par ressort est réglable en continu et peut être utilisé dans n'importe quelle position. Sa surface lisse, ainsi que sa poignée stérilisable simplifient le nettoyage de la lampe D^{med}® triango. Enfin, le système optique hautes performances, la finition et les composants de haute qualité garantissent la longue durée de vie de la lampe.

TRIANGO compact


- Réglage aisé et sûr pour les gauchers, comme pour les droitiers
- Rayon d'action maximal
- Nettoyage et entretien aisés
- LED de haute qualité et à longue durée de vie
- Aucun rayonnement calorifique
- Champ éclairé homogène (160 mm, 60 000 lx / 1 m)

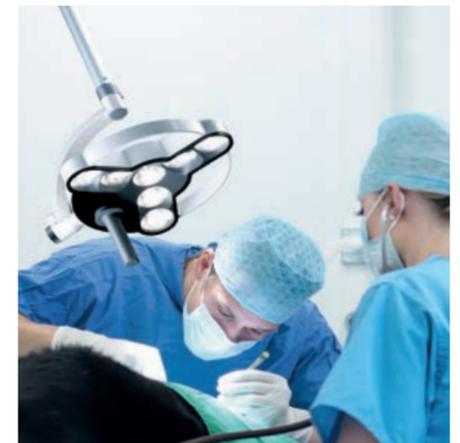

TRIANGO



Version plafond

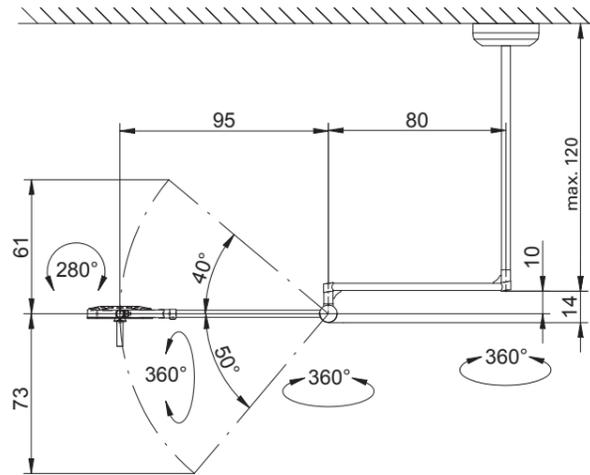


triango 30 C

TRIANGO – VERSION PLAFOND N° DE COMMANDE

triango 30 C	blanc pur	raccordement direct sans fiche	D15.170.000
--------------	-----------	--------------------------------	-------------



Version murale

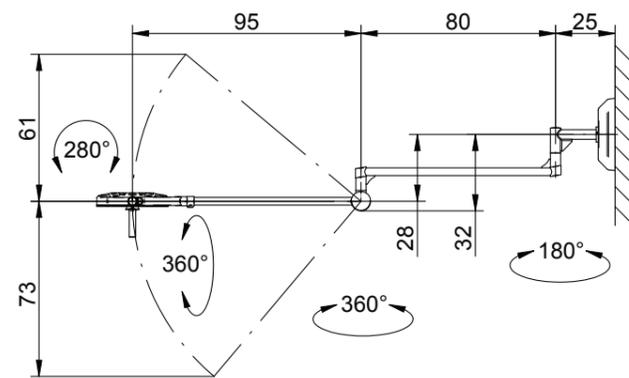



triango 30 W

TRIANGO – VERSION MURALE

triango 30 W	blanc pur	raccordement direct sans fiche	D15.175.000
--------------	-----------	--------------------------------	-------------

Données techniques TRIANGO

Rendement lumineux	60 000 lx / 1 m *
Température de couleur	env. 4 500 K *
Champ d'éclairage à 1 m	Ø 16 cm *
Profondeur d'éclairage	1,2 m
Indice de rendu des couleurs	IRC > 95
Commande	bouton rotatif sur la tête de lampe
Accessoire	poignée stérilisable
Classe de protection	I
Normes	EN 60601-1 et EN 60601-2-41
Indice de protection	IP 43
Particularités	gradation en continu, sans entretien

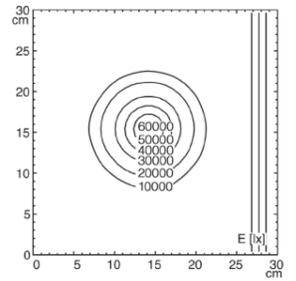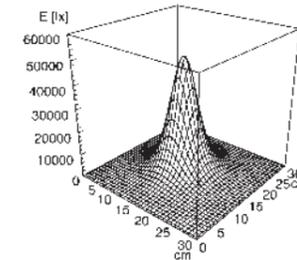


* -10 % / +20 % de tolérance



piètement à roulettes

piètement à roulettes – Batterie

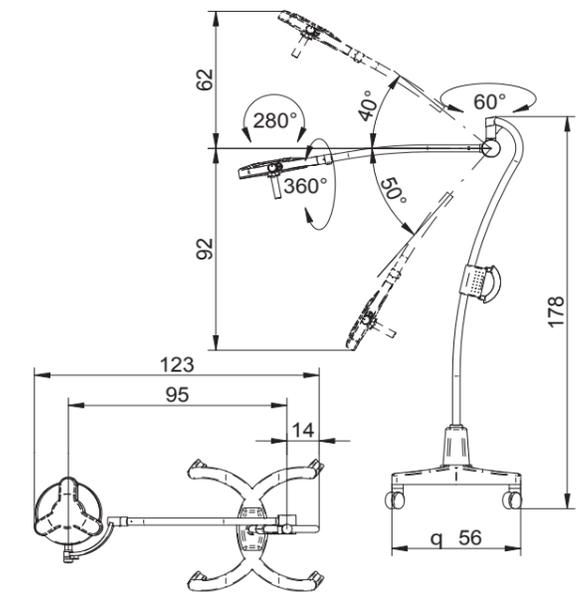

triango 30 F

TRIANGO – PIÈTEMENT À ROULETTES

N° DE COMMANDE

triango 30 F	blanc pur	fiche européenne	D15.171.000
triango 30 F	blanc pur	fiche suisse	D15.172.000
triango 30 F	blanc pur	fiche anglaise	D15.173.000

TRIANGO – PIÈTEMENT À ROULETTES – BATTERIE

N° DE COMMANDE

triango 30 F avec batterie	blanc pur	fiche européenne	D15.421.000
triango 30 F avec batterie	blanc pur	fiche suisse	D15.422.000
triango 30 F avec batterie	blanc pur	fiche anglaise	D15.423.000