

BOOSTING ICE NEEDLING

TargetCool est un dispositif médical de refroidissement cutané non invasif et sans contact qui permet d'**optimiser l'efficacité des procédures esthétiques** telles que le Botox et les produits de comblement en réduisant la douleur, l'inflammation et le gonflement.



red dot winner 2023
innovative product

TargetCool permet l'administration transdermique de cosméceutiques

TargetCool®

Capteurs infrarouges

Détectent instantanément la température de la zone cible afin que le module de contrôle puisse ajuster rapidement la température.

Module de contrôle

Contrôle thermique instantané du réfrigérant cryogénique pour une température cible optimale et stable.

Poignée et gâchette

Avec un poids de seulement 460 g, cet appareil est léger et sa poignée en caoutchouc offre une prise ferme pour un confort et une commodité d'utilisation maximaux.

Cavité pour cartouche

Une cavité en forme de spirale pour insérer facilement la cartouche de gaz.

Écran LCD

Affiche en temps réel la température cutanée pour un traitement précis et approprié.

Bouton de commande

Un seul bouton permet de régler différentes options. Il suffit de tourner le bouton pour régler facilement la température et la durée.




CE
medical 2265


Un appareil 3 en 1

Cooling
Rapide et précis

- Procédures d'injection
 - Botox, PRP, produits de comblement, etc.
- Traitement de l'inflammation
 - Acné, laser, traitement à base d'énergie
- Traitement de la perte de cheveux

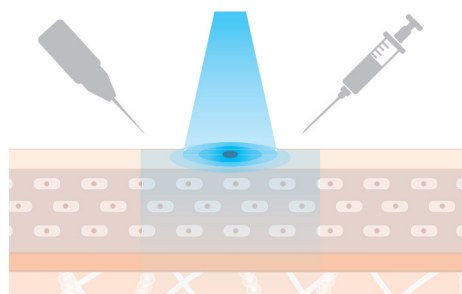Boosting
Ice Needling


- Administration transdermique de cosméceutiques
- Rajeunissement de la peau
 - Traitement topique
 - MTS, micro-needling RF
- Post-traitement
 - Réduction des effets secondaires du traitement
 - Meilleure absorption

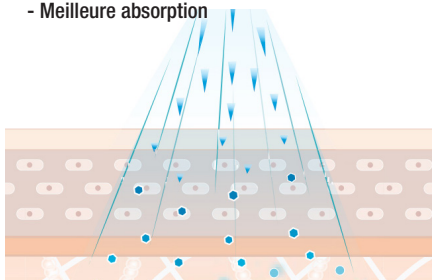

Cryochirurgie



- Garantit des procédures sûres et efficaces pour la cryochirurgie ciblée
 - Ablation des acrochordons
 - Élimination des verrues
 - Élimination des lésions cutanées

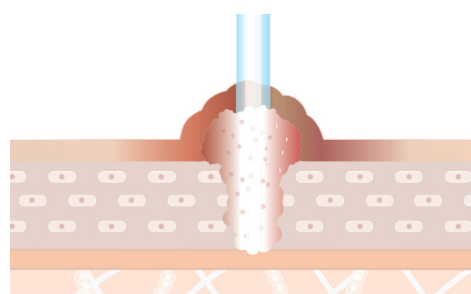

Spécifications :

Type d'énergie	Dioxyde de carbone
Taille	149 (L) x 248 (H) x 39 (l) mm
Poids	457 g
Puissance	Chargeur : Entrée : AC 100-240V-50/60Hz 600mA Sortie : DC 5V—3A, 9V—3A, 12V—2.5A, 15V—2A, 20V—1.5A
Sélection du mode	PL, continu, manuel
Précision de la température cible	±1,5 °C

Conditions de fonctionnement

Température	15 °C à 30 °C
Humidité	30% à 80%
Pression atmosphérique	700 à 1060 hPa

Conditions de stockage

Température	-40 °C à 70 °C
Humidité	10% à 90%
Pression de stockage	500 hPa~1060 hPa