

# BELLA

**LiD**  
Eclairage Lighting 


**NOUVEAU**



Lampe d'examen à LED très puissante elle est parfaitement conçue pour la chirurgie mineure, la dermatologie et les soins intensifs.

## LED 17W

Le flexible souple et résistant qui maintient la tête de la lampe et sa poignée ergonomique permettent un positionnement précis et intuitif.

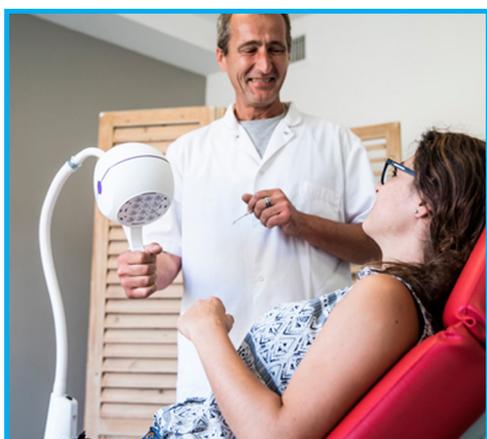


### EN OPTION :

Sur pied télescopique lesté (60/100 cm), Etau simple, étau universel, étau pour rail, bras mural articulé (2x40 cm).

- Un deuxième interrupteur sur la tête de lampe permet d'ajuster l'intensité lumineuse : 50% ou 100%.

Distance	Lux	Diamètre éclairé
30 cm	210 000	10 cm
50 cm	120 000	13 cm
100 cm	33 000	20 cm

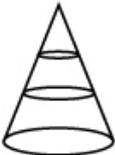

Watts	<b>17W</b>
Kelvins	4500° K
Lumens	1680 lm
Longévité des LED	50 000 heures minimum
Indice rendu de couleur (IRC)	95
Longueur de câble	3 mètres
Isolation	Classe II
Couleurs disponible	Blanc
Tête de lampe cotes	160 x 133 cm
Base de lampe cote	69 x 69 x 115 mm
Entraxe (4 trous base de lampe)	54,5 mm

Sur pied télescopique lesté

RÉFÉRENCES		
	Interrupteur classique	Interrupteur sans contact
Flexible 70 cm	LED 17650	LED 17650-ISC
Flexible 70 cm Option double intensité	LED 17650DI	LED 17650DI-ISC

Dispositif médical classe I /  
Fabrication française / Garantie 3 ans



**FRITSCH Medical**  
La Dermatologie est notre spécialité

[www.fritsch-medical.fr](http://www.fritsch-medical.fr)

5 rue de la Fontaine 67490 Gottesheim - France

Appelez-nous au : (+33) 03 88 91 47 70

E-mail : [contact@fritsch-medical.fr](mailto:contact@fritsch-medical.fr)