

# SANDRO DUAL

**WONTECH**

NOUVEAU



## SANDRO DUAL de WONTECH

**Long Pulsed – 755nm Alexandrite et 1064nm Nd:YAG**

Deux longueurs d'ondes disponibles sur une même plateforme,  
ainsi qu'un mode HYBRIDE

Vous pouvez ainsi disposer instantanément de la longueur d'onde adaptée au phototype de votre patient, ainsi que du mode hybride associant les 2 types de pulses (Alexandrite + Nd:YAG) pour encore plus d'efficacité et de sécurité.

### Indications :

- Epilation tous phototypes
- Lésions pigmentaires
- Lésions vasculaires
- Photo-rajeunissement - Mode Genesis (pores, ridules)



CE medical





**FRITSCH Medical**  
La Dermatologie est notre spécialité

[www.fritsch-medical.fr](http://www.fritsch-medical.fr)

## Principales caractéristiques :

**SANDRO DUAL** émet des impulsions laser de 755nm ou de 1064nm pour l'épilation et le traitement des lésions vasculaires ou pigmentaires, épidermiques ou dermiques.

Le choix des deux longueurs d'onde permet son utilisation sur tous les types de peau.

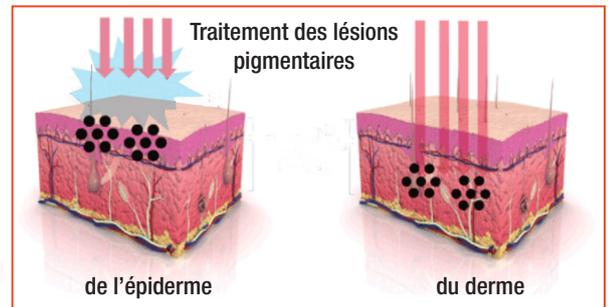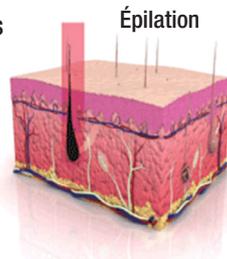

## Le mode HYBRIDE :

L'activation du mode **HYBRIDE** permet d'appliquer, par 2 pulses successifs à bref intervalle, les 2 longueurs d'onde pour plus d'efficacité et moins de dommages, autour des zones de traitement grâce à des énergies plus faibles.


- La pièce à main, légère et maniable, peut recevoir des optiques de spots allant de 2 à 20 mm de diamètre.
- Avec la taille maximale (20 mm), les temps de traitement pourront être sensiblement raccourcis.
- Un refroidissement intégré par gaz permet de contrôler la température de la peau, mais l'appareil est aussi compatible avec un refroidissement externe par air de type **ZIMMER**.



Taille de spot variable (2, 4, 6, 7, 10, 12, 15, 18, 20 mm)



## Deux longueurs d'onde :

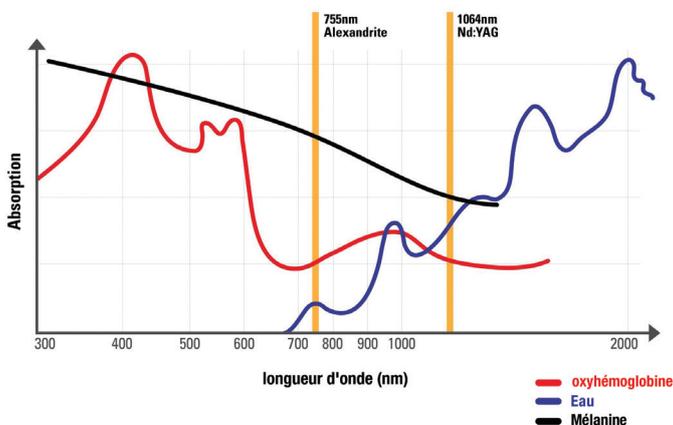

## Spécifications :

<b>Longueur d'onde</b>	755nm, 1064nm
<b>Type</b>	Alexandrite - Nd:YAG Long Pulsed - Hybride
<b>Energie</b>	60J (Alexandrite), 80J (Nd:YAG), 50J (Mode hybride)
<b>Durée d'impulsion</b>	0.2~300ms, 5~50ms (Hybride)
<b>Taux de répétition</b>	0.5~5Hz (Alex.) / 3Hz (Hybride)
<b>Taille des spots</b>	2, 3, 5, 7, 10, 12, 15, 18, 20 mm
<b>Système de refroidissement</b>	- SCS gas (Skin Cooling Spray) - Compatible Zimmer
<b>Alimentation Electrique</b>	AC 200~240V, 50/60z, 30A
<b>Dimensions (mm)</b>	470 (L) x 900 (P) x 1100 (H)
<b>Poids</b>	102 kg