

TIGHTAN, für das Gesicht und den Körper

(H.I.F.U.) High Intensity Focused Ultrasound

Die HIFU-Wellen von TIGHTAN realisieren ein Lifting des Gesichtes, reduzieren die Falten und straffen die Haut.

Falten, Poren und Hautstruktur werden deutlich verbessert.

2 HANDSTÜCKE

2 Handstücke, die die Verwendung von 2 verschiedenen Kartuschen (ohne Austausch) während der Behandlung ermöglichen.



3 Kartuschen für die Gesichtsbehandlung:
1,5 mm / 3,0 mm / 4,5 mm (Tiefe)

2 Kartuschen zur Körperbehandlung:
6 mm / 9 mm (Tiefe)

TIGHTAN erzeugt Koagulationspunkte in einer Tiefe von 4,5 mm auf der Ebene des aponevrotischen Systems (SMAS). Das ist der Schlüssel zum Facelift. Weitere Koagulationspunkte bei 3,0 mm und 1,5 mm stimulieren die Hautregeneration und Neokollagenese.


Die Energie wird in die Tiefe geleitet, es gibt keinen Schaden an der Oberfläche der Haut.

Die Behandlung mit TIGHTAN ist eine echte Alternative zum Lifting, nahezu schmerzfrei und ohne postoperative Folgen.

Diese Therapie ist besonders interessant für Personen, die die Auswirkungen der Zeit verzögern möchten, ohne die Unannehmlichkeiten einer Operation.

Eine Sitzung ist ausreichend. Der Lifting-Effekt tritt durch erneutes Spannen des SMAS sofort ein, das Ergebnis erreicht jedoch sein Maximum in 2-3 Monaten, wenn die induzierte Neo-Kollagenese ihre volle Wirkung entfaltet hat.

Bei einem Kontrollbesuch kann dann beobachtet werden, dass die Falten und Fältchen verschwunden oder stark zurückgegangen sind und das Gesicht sichtbar jünger aussieht.

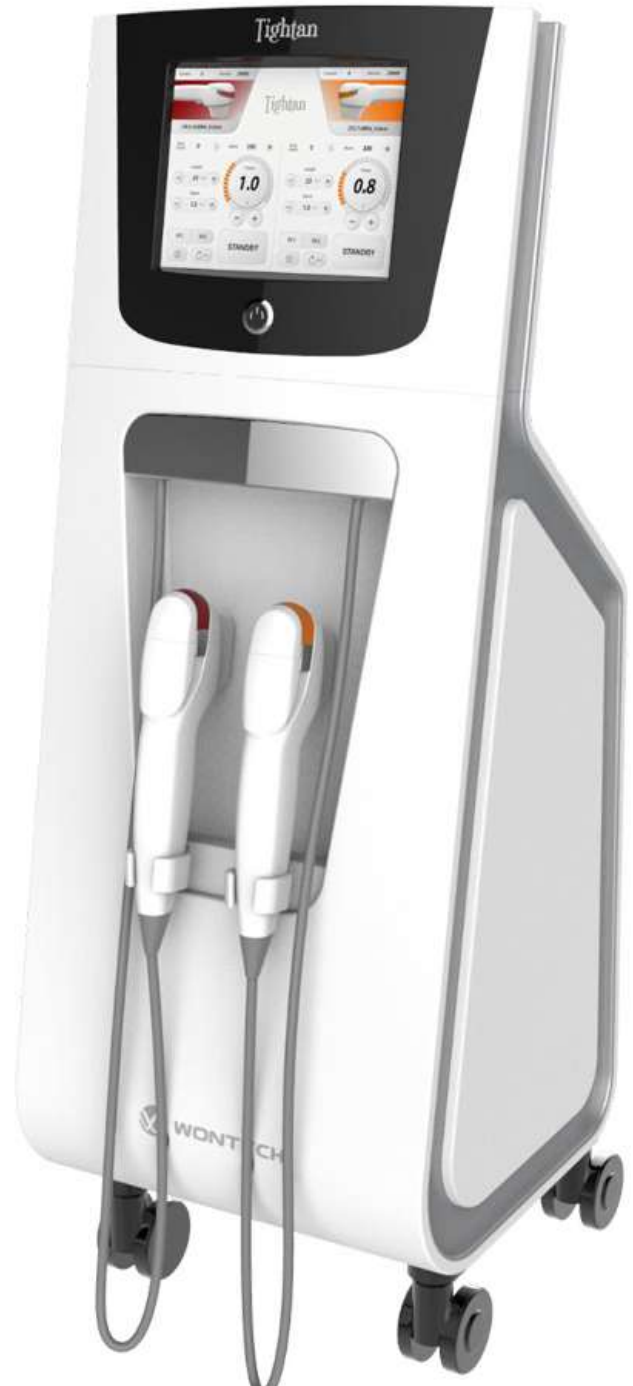

Indikationen:

- Gesicht und Hals
- Augenbrauen
- Wangen
- Submentaler Bereich
- Nasolabialfalte
- Feine Fältchen
- Periorbitales Lifting
- Unterarm
- Bauch
- Oberschenkel

2 Handstücke ermöglichen die Verwendung von 2 Tiefen ohne Kartuschenwechsel während der Behandlung.

Touchscreen zur Parametrierung der beiden Handstücke:



5 Kartuschen zur Behandlung:

Gesicht

Zur Behandlung von Gesicht und Dekolleté mit „Lifting“-Effekt.



1.5 mm-Kartusche (Gesicht)



3.0 mm-Kartusche (Gesicht)



4.5 mm-Kartusche (Gesicht)

Körper

Um unschöne Wölbungen zu reduzieren und die Hautspannung wiederherzustellen.



6.0 mm-Kartusche (Körper)



9.0 mm-Kartusche (Körper)

Spezifikationen:

Gerätetyp	HIFU – Hoch-Intensiver- Fokussierter- Ultraschall
Verarbeitungsfrequenz	2.0 MHz / 4.0 MHz / 7.0 MHz
Verarbeitungstiefe	4.0 MHz : 4.5mm 7.0 MHz : 3mm 7.0 MHz : 1.5mm 2.0 MHz : 6.0mm 2.0 MHz : 9.0mm
Maximale Energie	3J/cm ² (in Schritten von 0,1J/cm ²)
Punktenabstand	1 bis 2mm
Linienlänge	Maximal 25 mm (einstellbar in 1-mm-Schritten)
Anzeige	Touchscreen
Abmessungen (mm)	400 (B) x 398,5 (T) x 1146 (H)
Stromversorgung	220/230V - 50-60 Hz - 300 VA
Gewicht	35 kg

