

# HEINE DELTA 30



## Principaux avantages :

- Image d'une grande netteté et d'une clarté cristalline, quelle que soit la distance de travail choisie
- Travail sans reflets ni éblouissements grâce à la polarisation optimale
- Une simple pression permet de passer d'un mode d'éclairage polarisé à un mode d'éclairage non polarisé et inversement
- Luminosité selon besoins : 3 niveaux d'intensités lumineuses
- Nettoyage facile à l'aide d'un spray désinfectant
- Grossissement : 10 fois
- Pas de contamination croisée : embout de contact gradué autoclavable
- Accumulateur avec technologie li-ion : pas d'effet mémoire, chargement sans avoir à se soucier de l'état de charge

### Le DELTA 30 est livré avec :

- Embout de contact gradué
- Chargeur USB
- Boîte de protection pour le transport

### EN OPTION :

- Embout de contact pour les endroits difficiles d'accès
- Chargeur de table
- Adaptateur universel pour smartphones

## Indispensable pour le dépistage des cancers cutanés

La reconnaissance précoce des cancers de la peau est inconcevable sans un dermoscope de haute qualité.

Image extrêmement nette avec le nouveau système optique achromatique HEINE

Champ de vision maximal avec 30 vrais mm de Ø (lentille de 32 mm)

Changement rapide de mode d'examen polarisé/ non polarisé

LEDHQ  
LED NOW IN HEINE QUALITY.

Fidélité des couleurs exceptionnelle grâce aux LEDHQ

Bouton marche/arrêt

Excellente prise en main grâce à un corps ergonomique

Documentation numérique avec l'application exclusive HEINE DERM ou le système HEINE Cube

En option :  
Chargeur de table



Connecteur USB

# HEINE DELTA ONE



Image extrêmement nette avec le nouveau système optique achromatique HEINE

Changement rapide de mode d'examen polarisé/non polarisé

Connecteur micro USB

Se glisse dans toutes les poches de blouse



Travail sans reflets ni éblouissements grâce à la polarisation

Fidélité des couleurs exceptionnelle grâce aux LEDHQ

**LEDHQ**  
LED NOW IN HEINE QUALITY

Documentation numérique avec l'application exclusive HEINE DERM ou le système HEINE Cube




## Principaux avantages :

- Image d'une grande netteté et d'une clarté cristalline, quelle que soit la distance de travail choisie
- Champ de vision avec 21 véritables mm de Ø (lentille 22 mm)
- Luminosité selon les besoins : 3 niveaux d'intensités lumineuses
- Nettoyage facile à l'aide d'un spray désinfectant
- Grossissement : 10 fois
- Pas de contamination croisée : embout de contact gradué autoclavable
- Sur simple pression de bouton, passer d'un mode d'éclairage polarisé à un mode d'éclairage non polarisé et inversement
- Accumulateur avec technologie li-ion : pas d'effet mémoire, chargement sans avoir à se soucier de l'état de charge
- Embout de contact pour les endroits difficiles d'accès (en option)
- Charger 30 chargeur de table

## Adaptateur Smartphone Universel

Vous pouvez utiliser tout type de téléphone, quel que soit le système d'exploitation (Android, Windows, ...) avec l'Adaptateur Smartphone Universel de HEINE.

Vous aurez besoin d'un DELTA 30 ou DELTAone, de l'adaptateur et d'une coque de téléphone portable adaptée à votre smartphone.

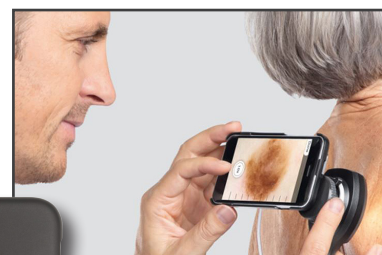

**FRITSCH Medical**  
La Dermatologie est notre spécialité

[www.fritsch-medical.fr](http://www.fritsch-medical.fr)

5 rue de la Fontaine 67490 Gottesheim - France

Appelez-nous au : (+33) 03 88 91 47 70

E-mail : [contact@fritsch-medical.fr](mailto:contact@fritsch-medical.fr)