

Série-7

UVB-NB (311nm), UVA

Daavlin[®]
Let's Be Clear



L'appareil Série-7 est spécialement conçu pour offrir un traitement complet du corps dans un petit espace.



- Le série-7 est conçu pour fonctionner en configuration de 8, 10 ou 12 lampes.
- Les types de lampes disponibles sont UVA, UVB à bande étroite (311nm) ou UVB à large bande.
- Le système de commande fonctionne, soit comme une minuterie, soit avec un dosimètre intégré.
- Le contrôleur à écran tactile ClearLink™ de Daavlin est intuitif et garantit la sécurité des traitements et la conformité au plan de thérapie prescrit par le médecin.
- **Code d'accès :**
Une fonction de verrouillage programmable empêche toute utilisation non autorisée. Les appareils avec dosimétrie indiquent également l'irradiance en mW/cm².
- 2 panneaux articulés enveloppent chaque hémicorps et se rabattent pour protéger les lampes lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
- Pour les particuliers, l'appareil est vendu sur prescription médicale uniquement.



Série-7 avec 4 panneaux qui se rabattent pour protéger les lampes.



FRITSCH Medical
La Dermatologie est notre spécialité

www.fritsch-medical.fr

Série-7


UVB-NB (311nm), UVA

Daavlin[®]
Let's Be Clear



Dosimétrie ClearLink™ de Daavlin

Les appareils Série-7 sont équipés de la dosimétrie ClearLink™ de Daavlin. Le contrôleur à écran tactile ClearLink™ fonctionne soit comme une simple minuterie, soit comme un dosimètre intégré avec mesure d'irradiance continue et possibilité de suivi d'un plan de thérapie, établi par le médecin sur clé USB.

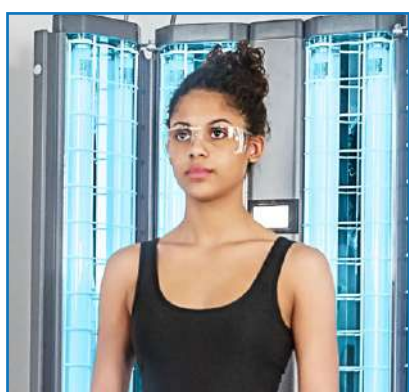

DONNÉES TECHNIQUES :

4 PANNEAUX

Zone de traitement	(83.8 cm x 178.4 cm)
Hauteur	189.2 cm
Largeur	100.3 cm
Profondeur (pieds non inclus)	16.5 cm
Poids (selon configuration)	48-58.5 Kg
Tensions disponibles	110-120V & 220-240 V



FRITSCH Medical
La Dermatologie est notre spécialité

www.fritsch-medical.fr

5 rue de la Fontaine 67490 Gottesheim - France

Appelez-nous au : +33 (0)3 88 91 47 70

E-mail : contact@fritsch-medical.fr