

## Ganzkörper-UV-Phototherapie-Kabine, oktogonal (kombiniert UVA-UVB-311nm oder Mono-UVA oder Mono-UVB-311nm)



- Neue Technologie mit 40 vertikalen 2m-Röhren für eine bessere Homogenität der Strahlung (auch mit 40 oder 48 1,80 m-Röhren erhältlich), mit elektronischen Vorschaltgeräten, wodurch eine sofortige Zündung und eine erhöhte Lebensdauer der Röhren erreicht wird.
- Automatische Echtzeit-Dosimetrie.
- Lautsprecher-Ankündigungen des Therapieablaufs und Sicherheitshinweise.
- Fernsteuerung und Software "Smart Touch" für individuelle Patientenbehandlungspläne auf separat angeschlossenem, zugehörigem PC für mehr Patientensicherheit und Rückverfolgbarkeit.
- CE-Kennzeichnung für Medizinprodukte sowie FDA-Zulassung.




### Patientenkomfort

Durch die achteckige Geometrie ist die Kabine geräumig und dennoch nahe am menschlichen Körper. Eine Doppeltür erleichtert den Zugang zur Kabine, auch mit einem Rollstuhl; in diesem Fall kann die untere Plattform entfernt werden.

### SmartTouch-Technologie

NeoLux ist mit der SmartTouch(TM)-Technologie ausgestattet, dem exklusiven Steuerungssystem von Daavlin, das sowohl für den Arzt als auch für den Patienten viele Vorteile bietet.

SmartTouch integriert Funktionen wie die Verwaltung von Patientendaten, personalisierte Therapiepläne, die Rückverfolgbarkeit vom Verordner und der Behandlung sowie Sicherheitssystem zur Vermeidung einer versehentlichen Überdosierung.

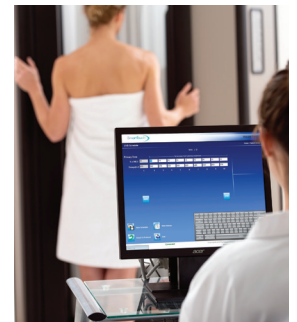

### Crystal Cool - Temperaturmanagement

Das Crystal Cool-Temperaturmanagementsystem bietet eine optimale Umgebung für den Patienten und verlängert gleichzeitig die Lebensdauer der Lampen. Für diejenigen, die den Luftstrom während der Behandlung spüren möchten, stehen zwei Kühlventilatoren mit einem patientengesteuerten Ein-/Ausschalter zur Verfügung.

# Kabine NeoLux

**Daavlin**  
Let's Be Clear



Die NeoLux-Ganzkörperkabine ist mit einer UV-durchlässigen Innenverkleidung aus kristallklarem Acrylglas ausgestattet, die den direkten Kontakt des Patienten mit den Röhren verhindert und die Reinigung erleichtert.



Das äußere Erscheinungsbild der Kabine ist auf Wunsch veränderbar.

Nachstehend finden Sie eine Auswahl von Außenverkleidungen für Ihre Kabine.



Offener und geräumiger Innenraum, der groß genug ist, um einen Rollstuhl aufzunehmen.

Wählen Sie dekorative Platten in Standard- oder mit Ihren Wunsch-Farben!

Griffe im Inneren: Sicherheit für Ihre Patienten.

Acrylplatten schützen vor Schmutz und verhindern, dass Patienten mit den Lampen in Kontakt kommen.

Das integrierte Kühlsystem der Lampen und für das Innere des Lampengehäuses, vereint Komfort für den Patienten und erhöht gleichzeitig die Lebensdauer der Lampen.

Abnehmbare erhöhte Plattform zur Behandlung der unteren Extremitäten.



Kühlende Ventilatoren für den Patienten. Ein Lautsprecher gibt automatisch Meldungen zur Information des Patienten. Mehrere Sprachen sind hierzu verfügbar und können für jeden Patienten individuell angepasst werden.

Diskretes Patientenüberwachungsfenster mit UV-blockierendem Plexiglas.

Sollte der PC ausfallen, kann die Kabine mit dem touchscreen timer «Clearlink™» bedient werden.



**Smartouch™**  
PC-basierte Software für die Verarbeitung und Verwaltung von Patientenakten ist im Lieferumfang enthalten. Möglichkeit der Fernsteuerung und Verwaltung anderer Daavlin-Geräte (z.B. Serie M, Hand-Fuß-Einheiten).

## TECHNISCHE DATEN:

### NeoLux (1,80 m Röhren)

Höhe	213 cm
Breite (bei geschlossenen Türen)	104 cm
Breite (bei geöffneten Türen)	135 cm
Tiefe (bei geschlossenen Türen)	102 cm
Tiefe (bei geöffneten Türen)	127 cm
Gewicht	260 Kg

### NeoLux Plus (2,00 m Röhren)

Höhe	239 cm
Breite (bei geschlossenen Türen)	104 cm
Breite (bei geöffneten Türen)	135 cm
Tiefe (bei geschlossenen Türen)	102 cm
Tiefe (bei geöffneten Türen)	127 cm
Gewicht	272 Kg

240 Volt Einphasig oder 400 V Dreiphasig - 5 KW bzw. 6 KW je nach Ausführung



**FRITSCH Medical**  
Die Dermatologie ist unsere Spezialität!

[www.fritsch-medical.fr](http://www.fritsch-medical.fr)

5 rue de la Fontaine 67490 Gottesheim - France

Rufen Sie uns einfach an: +33 (0)3 88 91 47 70

E-mail : [contact@fritsch-medical.fr](mailto:contact@fritsch-medical.fr)