

Cabine NeoLux

Daavlin[®]
Let's Be Clear

Sélectionnée par UniHA

Cabine de photothérapie UV corps entier, octogonale (mixte UVA-UVB-311 ou mono UVA ou mono UVB-311)



- Nouvelle technologie à 40 ou 48 tubes verticaux de 1m80 ou 2m pour une meilleure homogénéité du rayonnement (selon version), alimentés par des ballasts électroniques pour un allumage instantané et une durée de vie des tubes augmentée.
- Dosimétrie automatique.
- Annonces vocales de sécurité.
- Commande à distance et logiciel de traitement individualisé par patient «SmartTouch», sur PC séparé inclus.
- Marquage CE Médical.




Confort du patient

De géométrie octogonale, la cabine est spacieuse, tout en étant proche du corps humain. Une double-porte en facilite l'accès, même en fauteuil roulant; dans ce cas, on pourra retirer la plateforme inférieure.

Technologie SmartTouch

NeoLux est dotée de la technologie SmartTouch™, le système de contrôle exclusif de Daavlin qui offre de nombreux avantages, tant pour le praticien que pour le patient. SmartTouch™ intègre des fonctionnalités telles que la gestion des dossiers Patients, des plans de thérapie personnalisés, la traçabilité des prescripteurs et des traitements, ainsi que des systèmes de sécurité évitant tout surdosage accidentel.

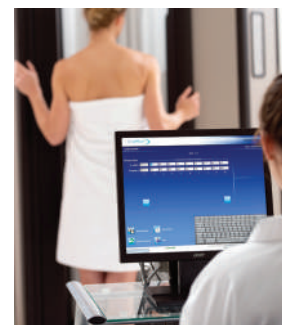

Crystal Cool - Gestion de la température

Le système de gestion de la température Crystal Cool offre un environnement optimal pour le patient et prolonge la durée de vie des lampes. Deux ventilateurs de refroidissement, avec un commutateur marche/arrêt contrôlé par le patient sont disponibles pour ceux qui veulent sentir le flux d'air, pendant leur traitement.



FRITSCH Medical
La Dermatologie est notre spécialité

www.fritsch-medical.fr

Cabine NeoLux

Daavlin[®]
Let's Be Clear

Sélectionnée par UniHA



La cabine corps entier NeoLux est dotée d'une protection intérieure acrylique Crystal Clear parfaitement transparente aux UV, qui évite au patient la possibilité d'un contact direct avec les tubes et facilite le nettoyage.



L'apparence extérieure de votre cabine est modifiable.

Ci-dessous une sélection de panneaux extérieurs disponibles pour votre cabine.



Intérieur ouvert et spacieux, assez grand pour accueillir un fauteuil roulant.

Choisissez des panneaux décoratifs parmi les couleurs standards ou personnalisables.

Poignées intérieures : sécurité pour vos patients.

Les panneaux acryliques protègent de la saleté et empêchent les patients d'entrer en contact avec les lampes.

Le système de refroidissement intelligent des lampes et de l'habitacle, améliore le confort des patients et la durée de vie des lampes.

Plate-forme amovible surélevée pour le traitement des extrémités inférieures.



Ventilateurs de refroidissement pour le patient. Le haut-parleur fournit des messages audibles pour informer et rassurer le patient. Disponible en plusieurs langues. Personnalisable par patient.

Hublot de surveillance du patient discret avec plexiglas bloquant les UV.

En cas de défaillance du système de commande par PC, un contrôleur à écran tactile Clearlink™ de DAAVLIN permet le fonctionnement de la cabine en mode dégradé.

Smartouch™
Logiciel de traitement et de gestion des dossiers Patients sur PC fourni. Possibilité de commande à distance et de gestion d'autres appareils Daavlin (Mains-Pieds).

DONNÉES TECHNIQUES :

NeoLux (Tubes de 1,80m)

Hauteur	213 cm
Largeur (avec portes fermées)	104 cm
Largeur (avec portes ouvertes)	135 cm
Profondeur (avec portes fermées)	102 cm
Profondeur (avec portes ouvertes)	127 cm
Poids	260 Kg

NeoLux Plus (Tubes de 2,00m)

Hauteur	239 cm
Largeur (avec portes fermées)	104 cm
Largeur (avec portes ouvertes)	135 cm
Profondeur (avec portes fermées)	102 cm
Profondeur (avec portes ouvertes)	127 cm
Poids	272 Kg

5 KW - 240 Volt Mono-phasé ou 400 Volt Tri-phasé - 6KW

CE medical



FRITSCH Medical
La Dermatologie est notre spécialité

www.fritsch-medical.fr

5 rue de la Fontaine 67490 Gottesheim - France

Appelez-nous au : +33 (0)3 88 91 47 70

E-mail : contact@fritsch-medical.fr