



Quest®

DIVAN D'EXAMEN • HAUTEUR VARIABLE ÉLECTRIQUE
EXAMINATION COUCH • ELECTRIC VARIABLE HEIGHT



LA RÉFÉRENCE DES DIVANS À HAUTEUR VARIABLE THE REFERENCE FOR POWER COUCHES



CONFORT

- > Largeur utile 100 % de la sellerie
- > Mouvements électriques doux
- > Possibilité de combiner pédale et commande manuelle (3 connections)



ACCESSIBILITÉ

- > Hauteur variable de 54 à 94 cm
- > Compatible avec un lève-malade



SÉCURITÉ

- > Pied en H très stable
- > Bras d'élévation robustes
- > Capacité 200 kg
- > Proclive - Déclive (sur certains modèles)
- > Batterie pour mouvements d'urgence (option)
- > Borne équipotentielle (option)



HYGIÈNE

- > Système Block'n Roll exclusif (modèles 2050-15/30/50)
- > Toutes les parties exposées sont accessibles au nettoyage
- > Revêtement avec protection antibactérienne

COMFORT

- > 100 % of the surface usefull
- > Smooth electrical motions
- > 3 connections possible (possibility to combine hand and foot control)

ACCESSIBILITY

- > Variable height from 54 to 94 cm
- > Compatible with a hoist

SAFETY

- > Very stable H shaped base
- > Sturdy elevation arms
- > 200 kg patient weight capacity
- > Trendelenburg - reverse trendelenburg (on specific models only)
- > Battery for emergency movements (option)
- > Equipotential terminal (option)

HYGIENE

- > Exclusive Block'n Roll system (models 2050-10/30/50)
- > All exposed parts are cleanable
- > Covering with antibacterial protection (depending on the color, see color chart)



Modèle présenté avec options/accessoires
Products shown with options/accessories

Hauteur variable
Variable height

54 / 94 cm

Surface couchage
Lying surface



65/75 x 200 cm

Capacité
Capacity



200 kg



ACCUEIL
WELCOME



POSITION HAUTE
HIGH POSITION



EXAMEN GÉNÉRAL
GENERAL EXAMINATION



DÉCLIVE
TRENDLENBURG



PROCLIVE
REVERSE TRENDLENBURG

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

Hauteur variable électrique de 54 à 94 cm
Structure acier avec finition époxy blanc
Dossier réglable par vérin à gaz ou vérin électrique
Commande manuelle
Patins de réglage sous piètement
Block'n Roll® - Système de roulettes escamotables intégrées semi-centralisé (réf : 2050-15, 2050-30 et 2050-50)
Support rouleau papier (longueur maxi 50 cm – ø 12,5 cm)
12 cm de dégagement au sol compatible avec le passage d'un lève-personne
Connexion de 3 commandes possible
Dispositif médical de classe électrique 2 / Disponible en classe 1 avec option 2059-01, non compatible avec 85114-01

STANDARD FEATURES

Electric variable height from 54 to 94 cm
Steel frame structure with white epoxy finish
Gas-spring assisted or electric backrest
Hand control
Adjustable levers under base
Block'n Roll® - Integrated retractable castor system semi centralized (ref: 2050-15, 2050-30 and 2050-50)
Paper roll holder (max length 50 cm – ø 12,5 cm)
Mobile hoist compatibility clearance of 12 cm
Possibility of 3 control connections
Electrical medical device class 2 / Available in class 1 with option 2059-01, not compatible with 85114-01

2050-10

Patins - dossier à gaz • Levellers - gas-spring assisted backrest

2050-15

Block'n Roll® - dossier à gaz • Block'n Roll® - gas-spring assisted backrest

2050-20

Patins - proclive / déclive - dossier à gaz • Levellers - tredenlenburg / reverse tredenlenburg - gas-spring assisted backrest

2050-30

Block'n Roll® - proclive / déclive - dossier à gaz • Block'n Roll® - tredenlenburg / reverse tredenlenburg - gas-spring assisted backrest

2050-50

Block'n Roll® - proclive / déclive - dossier électrique • Block'n Roll® - tredenlenburg / reverse tredenlenburg - electric backrest

SELLERIES / UPHOLSTERY

* Tous modèles, à commander séparément
All models, to order separately



81036

4 roues à frein double galet ø 50 mm
Set of 4 double castors with brakes ø 50 mm (pour/for 2050-10/20)

Pour sellerie/For upholstery
65 cm 75 cm



2231-65 2231-75

Trou pour visage
Face cutout in head cushion
uniquement sur sellerie plate
only with flat upholstery
600150-65 / 600150-75



600000-01

Montage de sellerie en usine
Factory assembly fitting of upholstery



2092

Batterie pour mouvements d'urgence
Battery for emergency movements



2059-01

Protection terre (classe 1)
+ borne equipotentielle
Earth socket (class 1)
+ equipotential terminal

OPTIONS*

* A demander impérativement lors de la commande, montage usine / Plant installed, must be ordered with initial order

ACCESSOIRES / ACCESSORIES

Pour sellerie plate/For flat upholstery
65 cm 75 cm

600150-65C

600150-75C

Protection cristal pied
Plastic cover (foot end)



850+166

Paire d'étriers
Pair of stirrups



840+166

Paire d'appui-jambes plastiques
Pair of plastic legrests



861

Paire de housses pour appui-jambes
Pair of covers for legrests



2056-02

Porte-rouleau réglable
Adjustable paper-roll holder
(350-800 mm)



2536+166

Appui-bras (unitaire)
Armrest (unit)



2537

Housse pour appui-bras (unitaire)
Cover for armrest (unit)



985-01+166

Tige porte-sérum
2 crochets
2 hook IV pole



2985-01+166

Tige porte-sérum autobloquant 2 crochets
Auto-locking 2 hook IV pole



2054-01

Appui-tête (pour sellerie anatomique)
Headrest (for formed upholstery only)



2055-01

Rallonge dossier
Backrest extension



1102-10

Appui-tête 52 cm
Headrest 52 cm



85114-01

Paire de barrières
Pair of barriers
Incompatible avec / Incompatible with 166, 985-01, 2985-01



30878-XXT+878-12

Paire de rails tête
Pair of head rails



30878-XXP+878-12

Paire de rails pieds
Pair of foot rails



2051-10

Commande par pédale
Foot control
(réf./ref. 2050-10/15)



2051-21

Commande par pédale
Foot control
(réf./ref. 2050-20/30)



2051-31

Commande par pédale
Foot control
(réf./ref. 2050-50)



166

Paire d'étau
Pair of clamps



878-12

Étau coulissant pour rail
25x10 mm, ø 16/18 mm
Sliding clamp for
25x10 mm rail, ø 16/18 mm



Lampes/Lamps + 166

Se référer à la documentation
Refer to the literature

POIDS NET • NET WEIGHT :
 Divan / couch : 83 kg – sellerie / Upholstery : 21 kg

POIDS BRUT • GROSS WEIGHT :
 Divan / couch : 121 kg – sellerie / Upholstery : 25 kg

VOLUME COLIS • PACKAGE VOLUME :
 Divan / couch : 0,96 m³ – sellerie / Upholstery : 0,28 m³

CHOIX DE SELLERIES NON-FEU M1 ANTIBACTÉRIEN




**CHOICE OF M1 ANTIBACTERIAL
 FIRE-RETARDANT UPHOLSTERY**

GAMME CLASSIQUE • CLASSIC RANGE

- CA - TOMATE
CA - TOMATO
- CB - FUCHSIA
CB - FUCHSIA
- CC - PRUNE
CC - PLUM
- CD - CITRON
CD - LEMON
- CE - PAON
CE - PEACOCK
- CF - SAPHIR
CF - SAPHYR
- CG - BLEU MINUIT
CG - MIDNIGHT BLUE
- CH - GLACIER
CH - GLACIER
- CI - OBSCURE
CI - DARK
- 57 - ANTISTATIQUE
57 - ANTISTATIC
- CJ - GRIS
CJ - GREY
- CK - PLATINE
CK - PLATINUM

GAMME ÉLÉGANCE* • ELEGANT RANGE*

- EA - VERT PROFOND
EA - DEEP GREEN
- EB - VÉGÉTAL
EB - VEGETAL
- EC - ORAGE
EC - STORM
- ED - BLEU ARGENTÉ
ED - SILVER BLUE
- EE - PAPRIKA
EE - PAPRIKA
- EF - CRÉPUSCULE
EF - TWILIGHT
- EG - CAMEL
EG - CAMEL
- EH - LIÈGE
EH - CORK

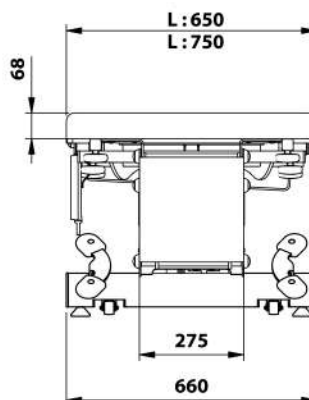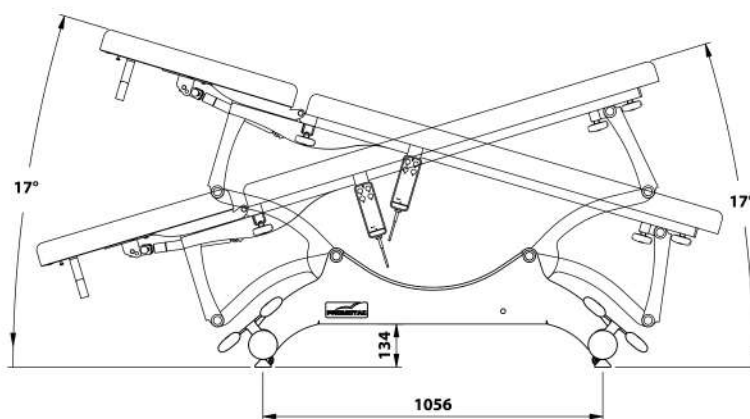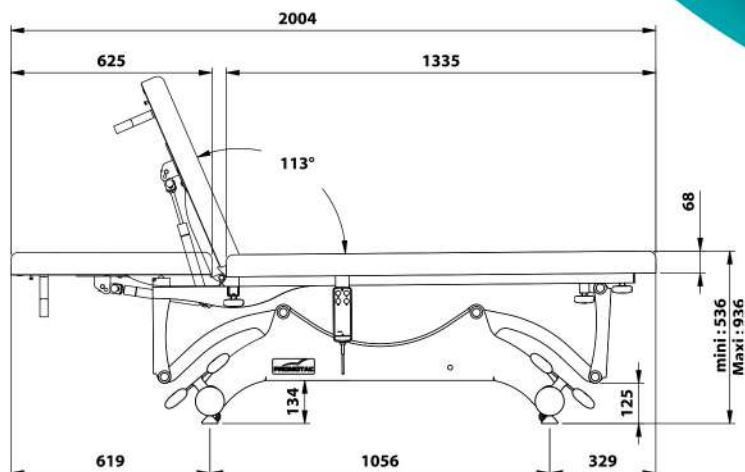

FRITSCH Medical
 La Dermatologie est notre spécialité

www.fritsch-medical.fr

5 rue de la Fontaine 67490 Gottesheim - France

Appelez-nous au : (+33) 03 88 91 47 70

E-mail : contact@fritsch-medical.fr